

# HÅNDBOG I KRYKKE - BCRA-R



## Indhold

[1.- Vigtigt](#)

[2.- Ikoner brugt på etiketten og i manualen](#)

[3.- Brug af produktet](#)

[4.- Produktbeskrivelse](#)

[5.- Advarsler og sikkerhed](#)

[6.- Montering og brug](#)

[7.- Tekniske specifikationer](#)

[8.- Pleje og vedligeholdelse](#)

[9.- Genbrug af produktet](#)

[10.- Opbevaring af produktet](#)

[11.- Levetid](#)

[12.- Garanti og eftersalgsservice](#)

[13.- Udførte prøver og forsøg](#)

[14.- Oplysninger om producent](#)

## **1.- Vigtigt**

Læs manualen omhyggeligt, før du bruger dette produkt, og opbevar den i tilfælde af behov.

Hvis du ikke kan læse eller forstå nogen advarsel, forsigtighed eller instruktion, skal du kontakte sælgeren, før du bruger produktet, ellers kan du risikere at komme til skade.

Kontakt din læge eller ortopædspecialist før brug. De vil rådgive dig om den mest passende gangteknik for dig.


## 2.- Ikoner brugt på etiketten og i manualen

	Oplysninger om producent
	Fremstillingsdato
	Medicinsk udstyr
	Overhold sikkerhedsinstruktionerne
	Maks. brugervægt i kg
	Erklæring om overensstemmelse
	Forsigtig, fare for fastklemning
	Tjek brugervejledningen
	Oplysninger om genbrug af produkter
	Genbrugsstation
<b>SN</b>	Produktets serienummer
<b>MASSE</b>	Produktets batchnummer
<b>REF</b>	Produktreference eller -kode

## 3.- Brug af produktet

Stokke, krykker og spadserestokke er hjælpemidler til at støtte mennesker med gangbesvær og hjælpe dem under gang.

## 4.- Produktbeskrivelse

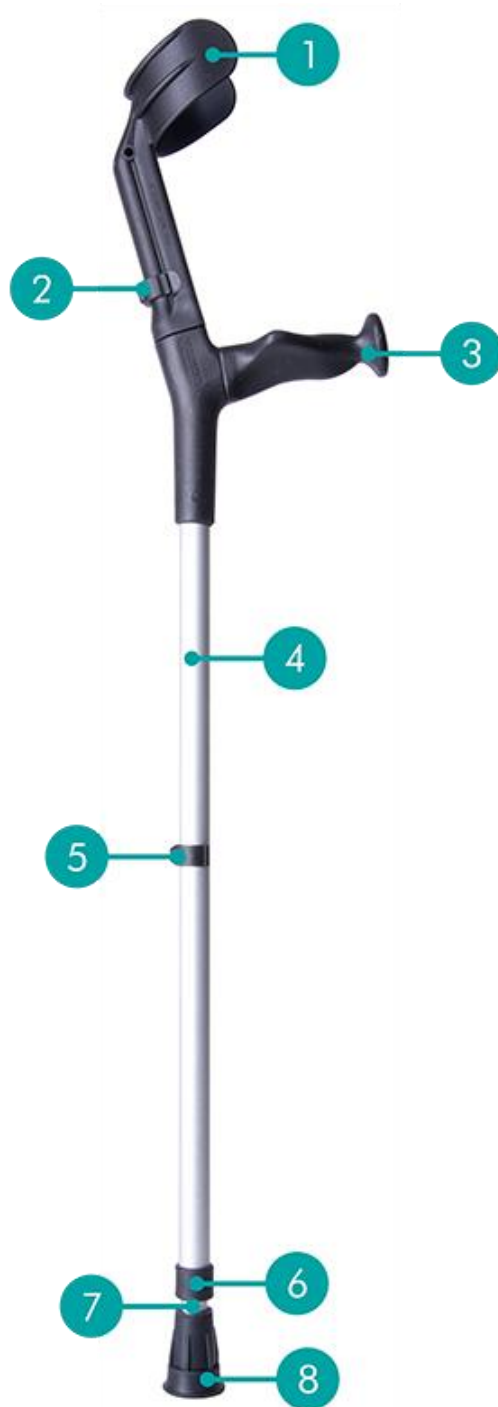

1. Albue bøjle
2. Klip til justering af albue
3. Gribe
4. Fast stang
5. Stang justering klip
6. Fastgørelse af gummi
7. Teleskopstang
8. Hylse


## 5.- Advarsler og sikkerhed



Manglende overholdelse af disse sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade.

- Overskrid ikke den maksimale vægtgrænse på 150 kg.
  - Sørg for, at alle dele er forsvarligt fastgjort og i god stand, før du bruger rollatoren.
  - Sørg for, at enhver mobil del er fastgjort af justeringsclipsene, og at grebets højde er den rigtige for dig, før du bruger produktet.
  - Brug produktet efter hensigten, stræk dig ikke for langt eller forsøg farlige bevægelser. Brug ikke produktet på glatte overflader og/eller ujævnt terræn. Det anbefales kun til brug på flade, faste overflader.
  - Udskift beskyttelsesrøret, hvis det er slidt eller beskadiget.
  - Brug kun originalt tilbehør og dele fra Forta-mærket.
  - Brug ikke produktet til at gå baglæns i den modsatte retning af den retning, du vender.
  - Foretag ikke justeringer eller ændringer af produktet, mens det er i brug.
- Brug ◦ ikke produktet på våde, iskolde eller snedækkede skråninger.
- Hvis en del er beskadiget, ødelagt eller slidt, skal du kontakte din distributør for at få en ny.

## 6.- Montering og brug

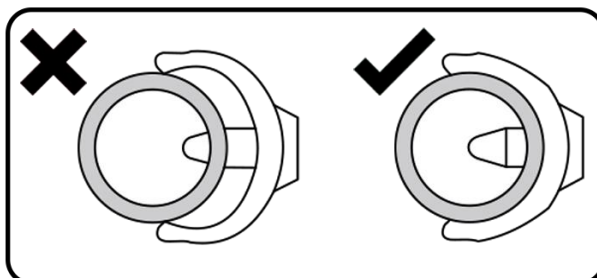

- For at justere højden skal du først fjerne justeringsklemmen og derefter skubbe det indvendige rør til den ønskede højde, og justere hullerne i rørene. Placer derefter justeringsklemmen for at sikre og fastgøre højden.
- Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at justeringsclipsene er fastgjort og korrekt placeret som vist på billedet ovenfor.
- Krykken skal bruges med armen på den modsatte side af det skadede ben.
- Juster højden på krykken, så du ikke behøver at bøje dig forover. Den rigtige højde er højden, hvor du kan stå helt oprejst.

## 7.- Tekniske specifikationer

Mål, bæreevne og vægt er angivet nedenfor:

HØJDE TIL AT HÅNDBERE	VÆGT	MAKSIMAL BELASTNING
900 - 1260mm	0,650 kg	150 kg

## 8.- Pleje og vedligeholdelse



Manglende pleje og vedligeholdelse af produktet i perfekt stand kan føre til risiko for en ulykke.

- Rengør produktet regelmæssigt med varmt vand og en blød klud. Brug ikke slibemidler, rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
- Tør af med en ren, blød og tør klud.
- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder phenol eller klor, som kan beskadige materialerne.
- I tilfælde af fejl må du ikke selv reparere rollatoren. Kontakt en autoriseret forhandler.

## 9.- Genbrug af produktet



Når produktet er blevet ubrugeligt og skal bortskaffes, skal du kontakte din specialforhandler. Hvis du selv vil genbruge det, skal du spørge dit lokale affaldshåndteringsfirma eller nærmeste genbrugsstation til råds om bortskaffelse.

## 10.- Opbevaring af produktet



Hvis det ikke opbevares korrekt, kan produktet blive beskadiget, hvilket kan medføre risiko for en ulykke.

- Opbevar ikke dette produkt i længere tid i nærheden af en varmekilde eller i solen (f.eks. foran et vindue eller i nærheden af en radiator) eller i nærheden af en kold kilde.
- Hold produktet væk fra flammer og gnister. ◦

Opbevar produktet som følger:

- Opbevar produktet på et tørt, køligt sted.
- Beskyt produktet mod støv og rust ved at pakke det eller pakke det i poser.
- Opbevar alle fjernede dele eller komponenter sammen ét sted, så de ikke blandes sammen med andet eller går tabt.
- Læg ikke vægt på nogen komponenter (anbring ikke tunge genstande på produktet eller på nogen komponent).

## 11.- Levetid

Produktets forventede levetid er 1 år under normale forhold til brug, sikkerhed og vedligeholdelse. Efter den tid kan produktet bruges, så længe det forbliver under perfekte forhold til brug og vedligeholdelse. Nogle dele eller komponenter skal under alle omstændigheder udskiftes på grund af normal slitage inden for mindre end denne tid.

## 12.- Garanti og eftersalgsservice

**Garantibetingelser:**

Kun originale Forta-produkter købt hos autoriserede forhandlere er dækket af garantien mod defekter i dele og udførelse.

Garantien løber fra købsdatoen i 3 år for struktur og komponenter underlagt følgende betingelser:

- Kun originale FORTA-produkter købt hos autoriserede forhandlere vil være dækket af garantien mod defekter i dele og udførelse.
- Indkøbsvirksomheden skal straks give meddelelse om enhver defekt ved produktet.
- Producenten har intet ansvar for defekter forårsaget af forkert håndtering, uagtsomhed eller manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning.
- I garantiperioden vil enhver del, der viser sig at være defekt på grund af defekt montering eller materialer, blive repareret eller udskiftet gratis af Forta.
- Garantien bortfalder absolut, hvis der foretages forkerte ændringer eller justeringer af produktet, eller hvis der monteres dele eller ekstraudstyr, der ikke leveres til produktmodellen.
- Skader fra rust forårsaget af forkert brug eller uagtsomhed eller handlingen eller enhver væske eller gas, der kan beskadige produktet, er udelukket fra garantien.

**GARANTIE DÆKKER IKKE KONSEKVENSERNE AF EVENTUELLE REJSEPROBLEMER, ISÆR SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRANSPORT, AVANCETAB, UDGIFTER MV.**

**Forta har INTET ansvar under følgende omstændigheder:**

- Normal slitage af produktet eller uhensigtsmæssig eller forkert brug.
- Fejl i enhver montering eller reparation udført af køber eller en tredjepart. ◦ Uagtsom håndtering eller vedligeholdelse eller brug af uegnede dele.
- Reparationer eller ændringer udført på ikke-officielle værksteder.
- Forta har intet ansvar for skader eller tab, som brugeren eller nogen tredjepart lider som følge af ændringer eller ændringer af et produkt.
- Garantien udelukker også ændringer foretaget på anden måde end med originale Forta-dele.

Garantibeviset skal sendes til FORTA, SL sammen med en fotokopi af købsfakturaen inden for 15 dage fra købsdatoen. For at validere garantien skal brugeren indsende garantibeviset med stamp forseglingen på den stikkontakt, der solgte produktet. Du kan downloade [garantibeviset](https://www.fortasl.es/manuals/doc/GARANTIA%20CONTRACTUAL.pdf) her:

<https://www.fortasl.es/manuals/doc/GARANTIA%20CONTRACTUAL.pdf>.

### **13.- Udførte prøver og forsøg**

FORTA-produkter overholder bilag IV til MDR (EU) 2017/745, er CE-mærkede og er designet og testet i overensstemmelse med UNE-EN ISO 11334-1:2007. Forta er forpligtet til at certificere, at dets produkter overholder en række væsentlige krav. Der er en standard, der specificerer inspektions- og testmetoderne for at vise, at produkterne opfylder disse krav. De standarder, som produktet overholder, er anført nedenfor:

Kort beskrivelse af relevant lovgivning	Gældende ret
Oplysninger fra fabrikanten	UNE-EN ISO 20417:2021
Kvalitetsstyringssystem	UNE-EN ISO 13485:2018
Risikostyring	UNE-EN ISO 14971:2020
Afprøvning af medicinsk udstyr og krykker, stokke eller spadserestokke	UNE-EN ISO 21856:2023 UNE-EN ISO 11334-1:2007
Biologisk vurdering af medicinsk udstyr	UNE-EN ISO 10993-1:2021
Maksimal belastning	150 kg

## 14.- Oplysninger om producent

**FORTA - FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S.L.**

Pq. Emp. Campollano, c/C 90 Nave 1

02007 Albacete

Spanien -

Spanien

[info@fortasl.es](mailto:info@fortasl.es)

[www.fortasl.es](http://www.fortasl.es)



FREMSTILLET I EUROPA

